



Veltop Cosy 3

Istruzioni di montaggio

Grazie per aver scelto il Veltop Cosy 3. Questo prodotto è progettato, fabbricato e assemblato da CYCLO-SYSTEM, un'azienda con sede in Alta Savoia (74).


Per garantire il corretto utilizzo, il funzionamento e la lunga durata del vostro nuovo accessorio, vi preghiamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso e il montaggio. Lo scopo della copertura è quello di proteggere l'utente dalla pioggia, dal freddo e dal sole.

Questa versione può essere montata su tutte le carrozzine e sedie a rotelle elettriche dotate di 2 tubi verticali o di una barra orizzontale dietro il sedile.


Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe impedire il corretto funzionamento della protezione e causare il malfunzionamento di alcune parti. L'efficacia del sistema verrebbe quindi messa in discussione e ciò potrebbe compromettere la sicurezza del viaggio.

Scelta di due attacchi posteriori

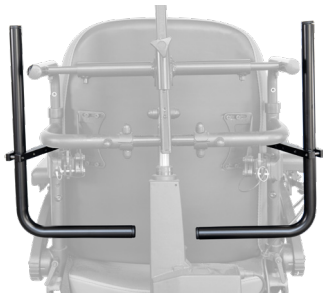

Montaggio su tubi verticali

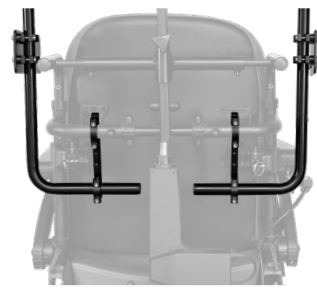

Montaggio sul tubo orizzontale

Contenuto del prodotto



Parte frontale trasparente



Protezione della parte superiore della gamba



Protezione della parte inferiore della gamba



Cappottina




Tubo a L



Due chiavi esagonali



Morsetti d'aggancio
32mm 22mm

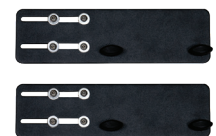

Due piatti

Opzione 1 - Montaggio sui 2 tubi verticali


Posizionare e serrare i ganci (dimensione 32 mm) sui due tubi verticali dietro il sedile.



0

Opzione 2 - Montaggio orizzontale del tubo

Posizionare e serrare le staffe (lato 32 mm) sul tubo orizzontale.

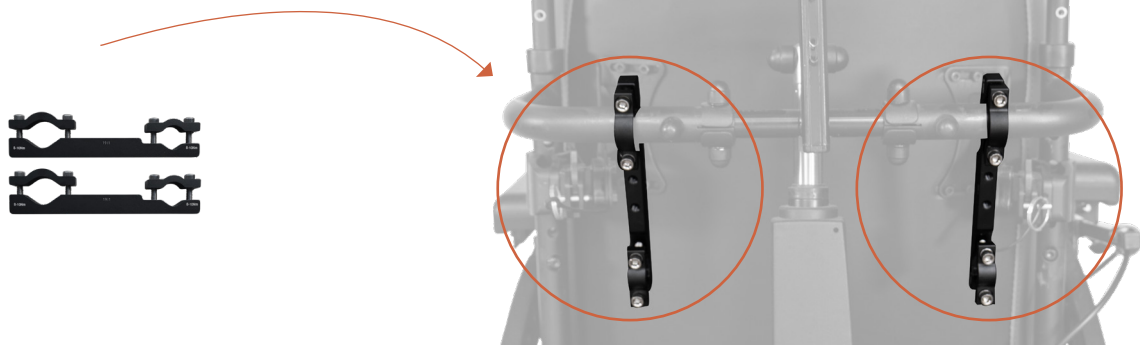

1

Montaggio di tubi a L

Posizionare i tubi a L nelle staffe, quindi serrare le viti.



2

Piastre di montaggio

Sollevere i braccioli per verificare che non si scontrino con le piastre.



3**Montaggio della cappottina**

Far scorrere le 2 piastre della cappottina lungo la piastra grande, quindi serrare le 2 manopole.

**4****Montaggio della parte anteriore trasparente**

Per aggiungere la protezione frontale trasparente, chiudere la cerniera.

**5****Montaggio della parte superiore della protezione per gambe**

Centrare e fissare la parte superiore della protezione per le gambe, quindi collegarla alla parte trasparente con il velcro.



6

Montaggio della parte inferiore della protezione per gamba

Chiudere la parte inferiore della protezione con la zip per coprire la parte inferiore delle gambe e ottenere una protezione completa.



Configurazioni



Regolazioni

È possibile regolare facilmente l'altezza della cappottina cambiando la posizione della piastra grande sul tubo verticale. La cappottina deve essere il più vicino possibile alla testa. La larghezza tra le 2 piastre grandi non deve superare la larghezza della sedia.



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCIA

T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
info@veltop.com
www.veltop.eu/it

VELTOP.eu
WEATHER PROTECTION



CE

Ref. VELCOSY3